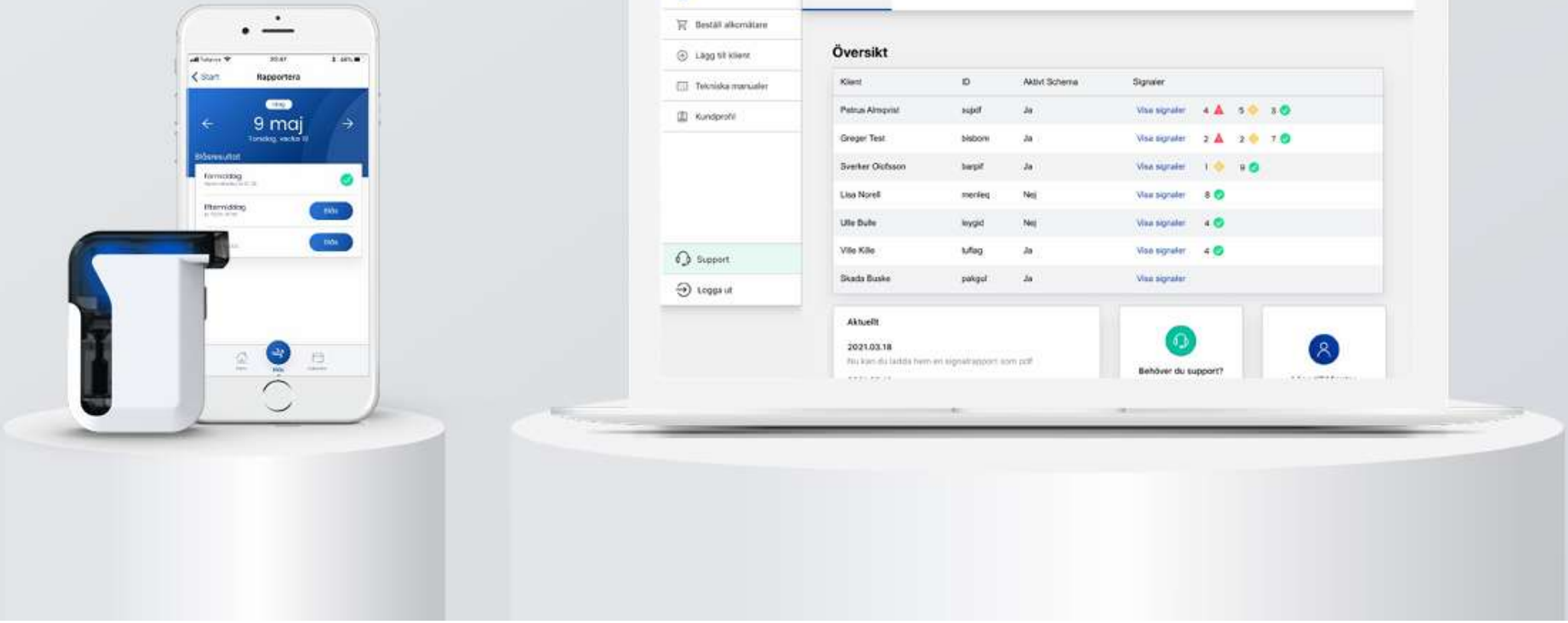
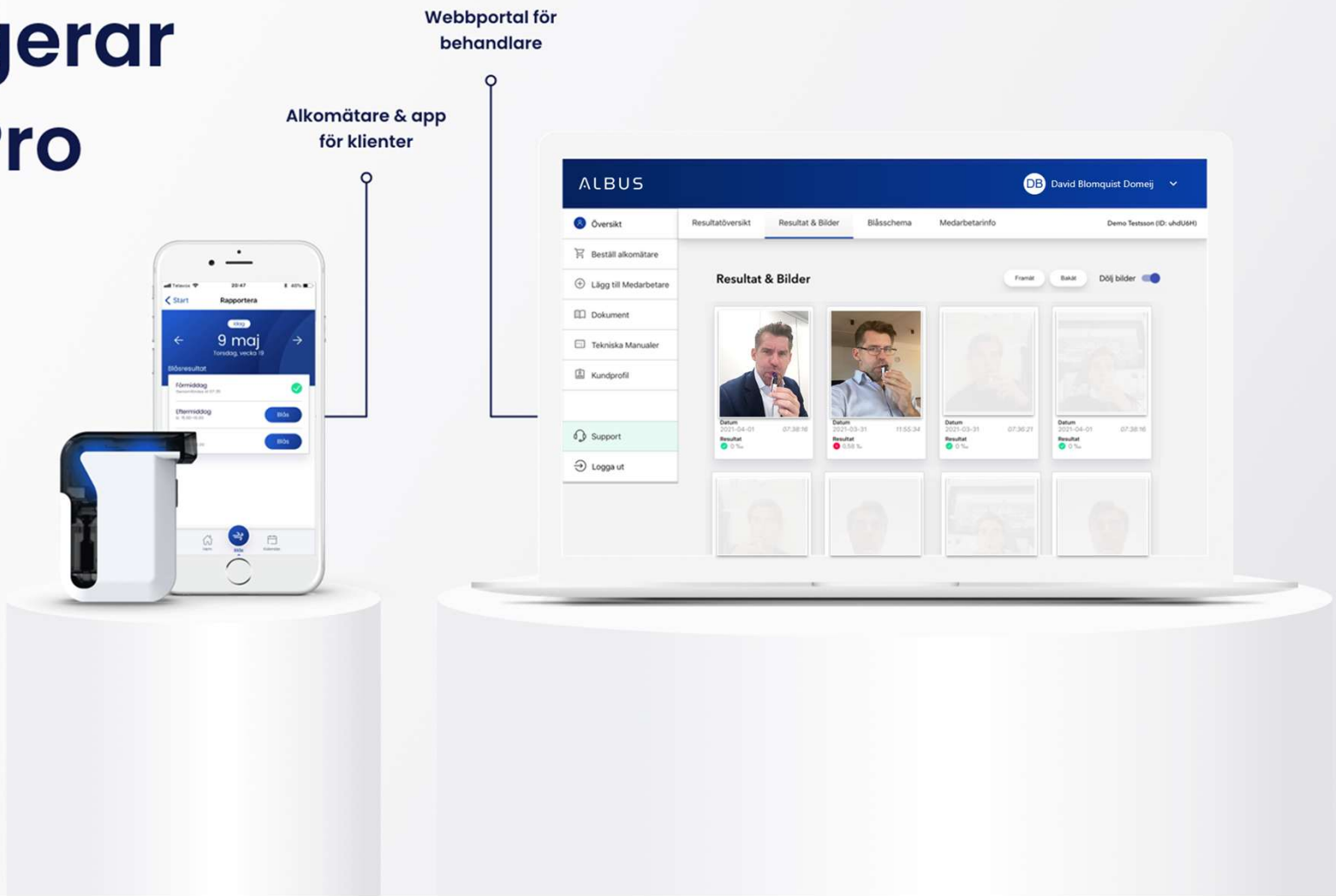
ALBUS

www.albuscare.com

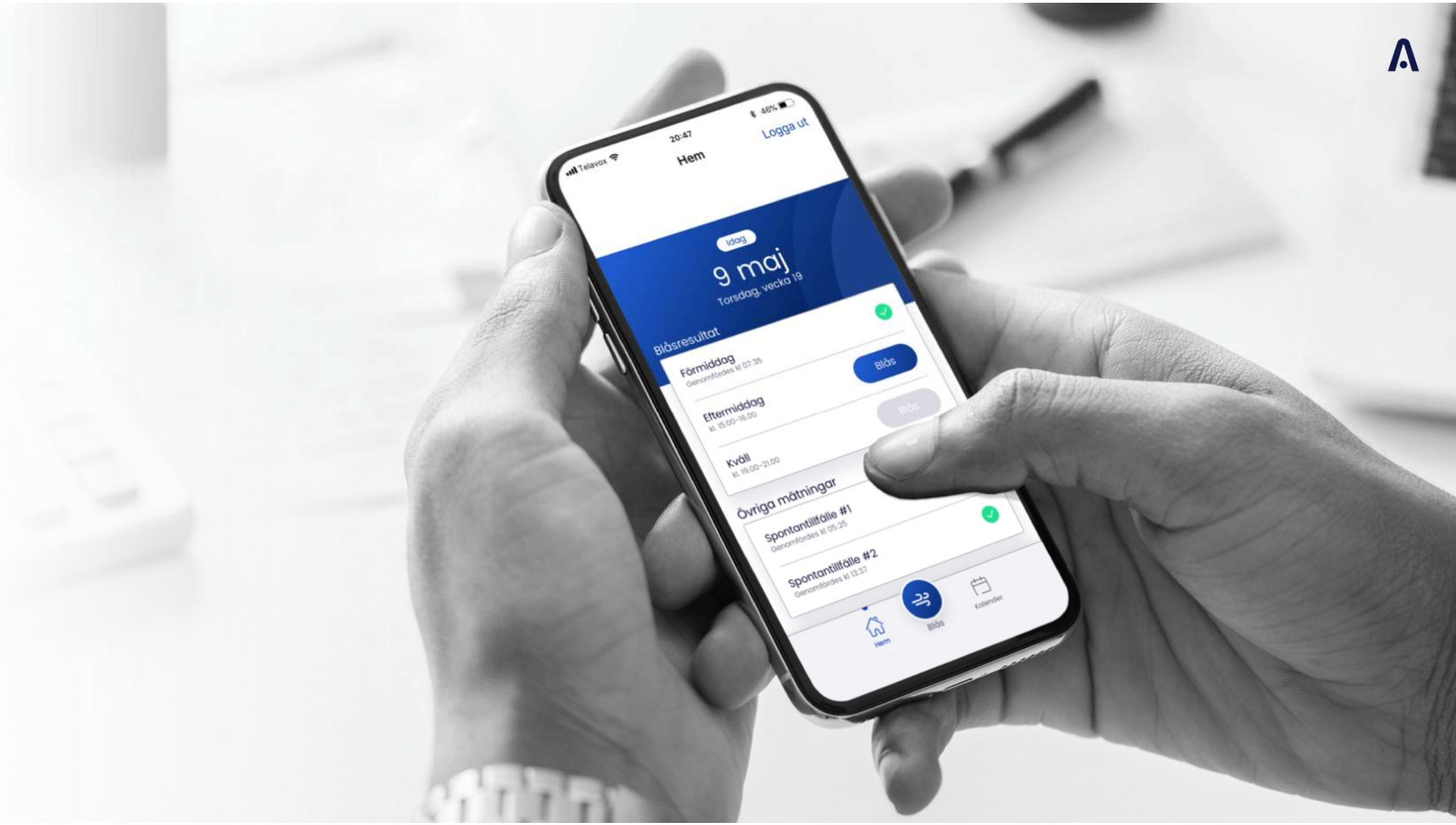


Så fungerar Albus Pro

Kontinuitet, kontroll och trygghet genom dagliga nykterhetstester. Schemalagda eller spontana, på distans och i realtid.

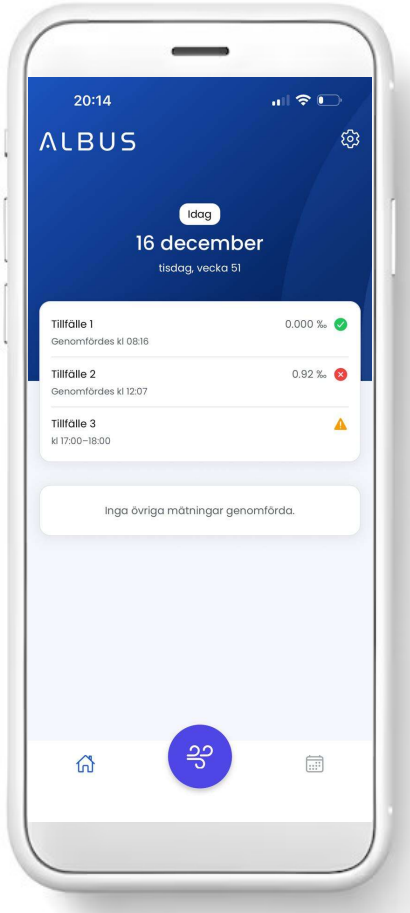


FDA REGISTERED · CE · GDPR COMPLIANT


Telavox
20:47
46%
Hem
Logga ut
Idag
9 maj
Torsdag, vecka 19
Blåsresultat
Förmiddag
Genomfördes kl 07:35
Blås
Eftermiddag
kl. 15.00–16.00
Blås
Kväll
kl. 19.00–21.00
Övriga mätningar
Spontantillfälle #1
Genomfördes kl 05:25
Spontantillfälle #2
Genomfördes kl 13:37
Hem
Blås
Kalender

Klient-appen

- Klientens telefon behöver ha bluetooth påslaget
- Mätaren tar ca 12 sekunder att värma upp
- Utandningen sker i jämn medelintensiv takt i ca 5 sekunder
- Mätaren knäpper till när blåset är klart





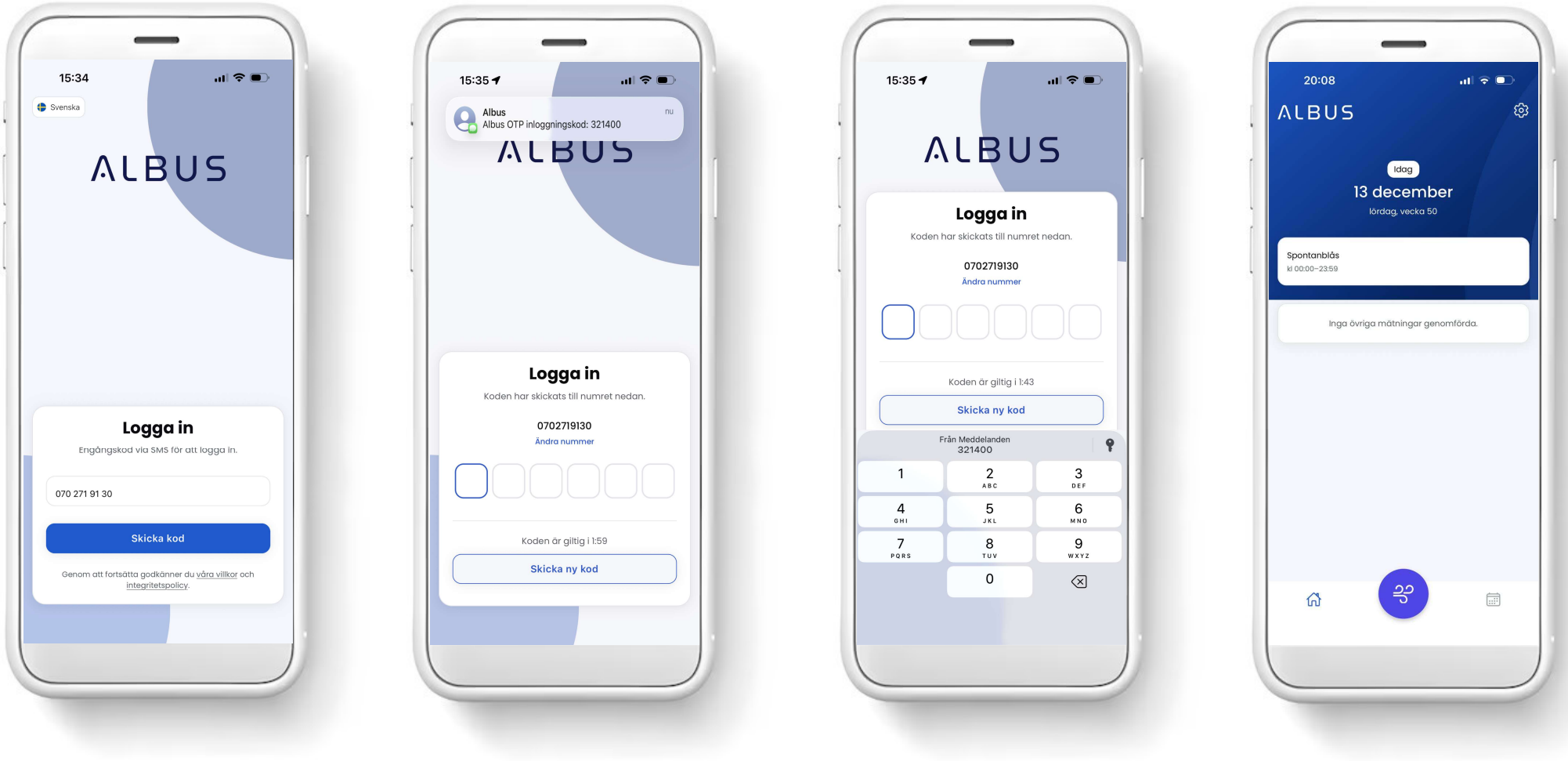
Centrala fördelar

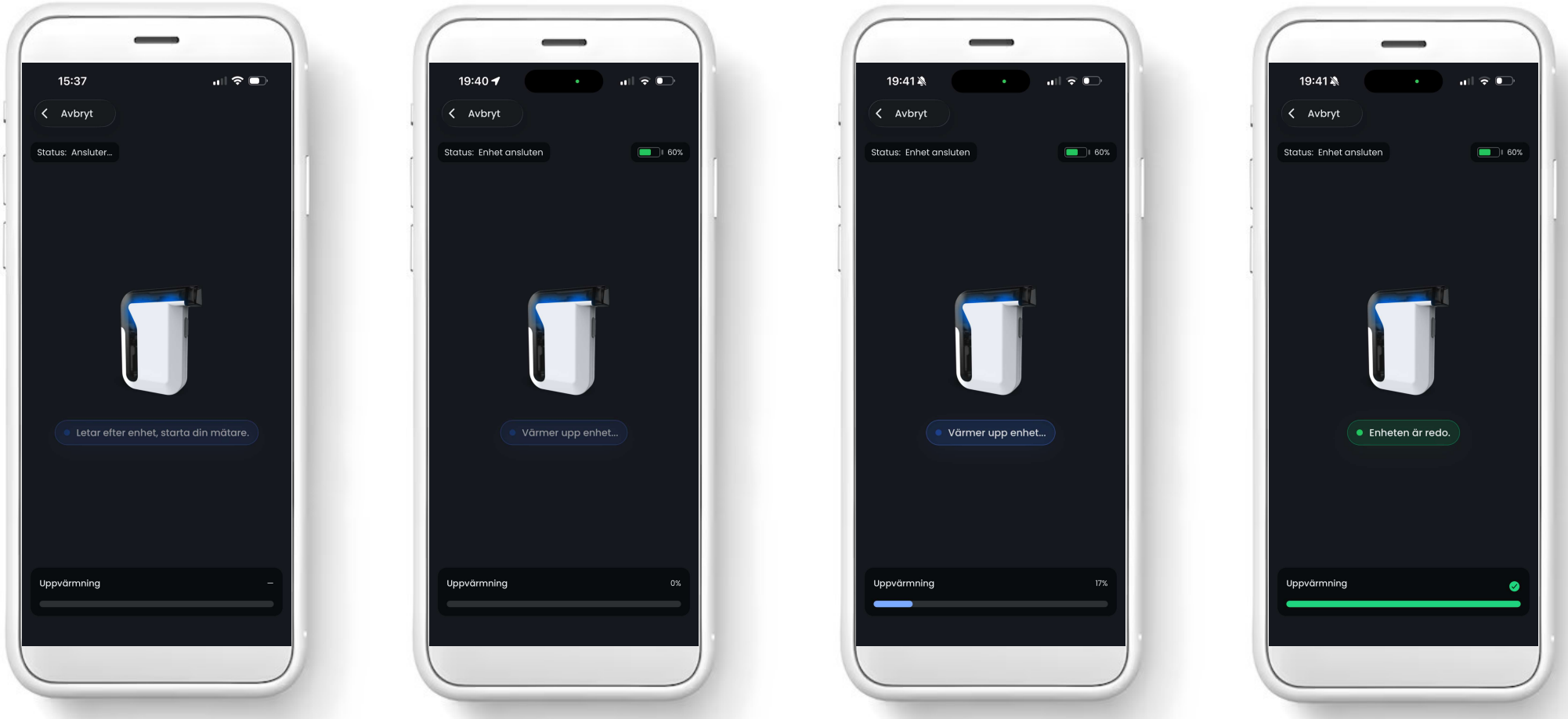
Behandlare
- Får en kontinuerlig inblick och kan agera tidigare vid avvikelser
- Kan arbeta mer resurseffektivt
- Kan ge stöd på distans

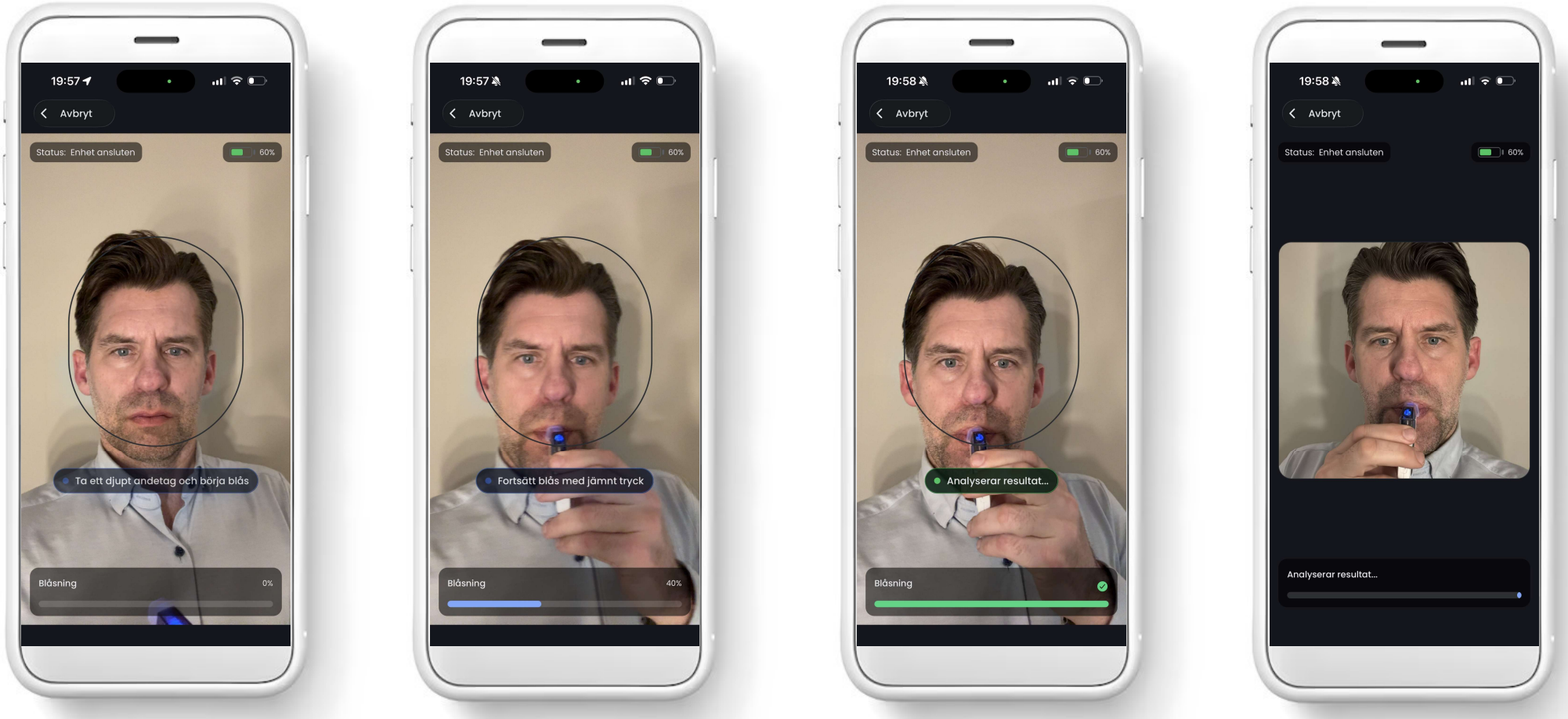
Klienter
- Kan utföra tester på distans, utan att någon ser på
- Behöver potentiellt göra färre urin- och blodprover
- Får ökad trygghet och kan dela resultat för att återbygga förtroenden

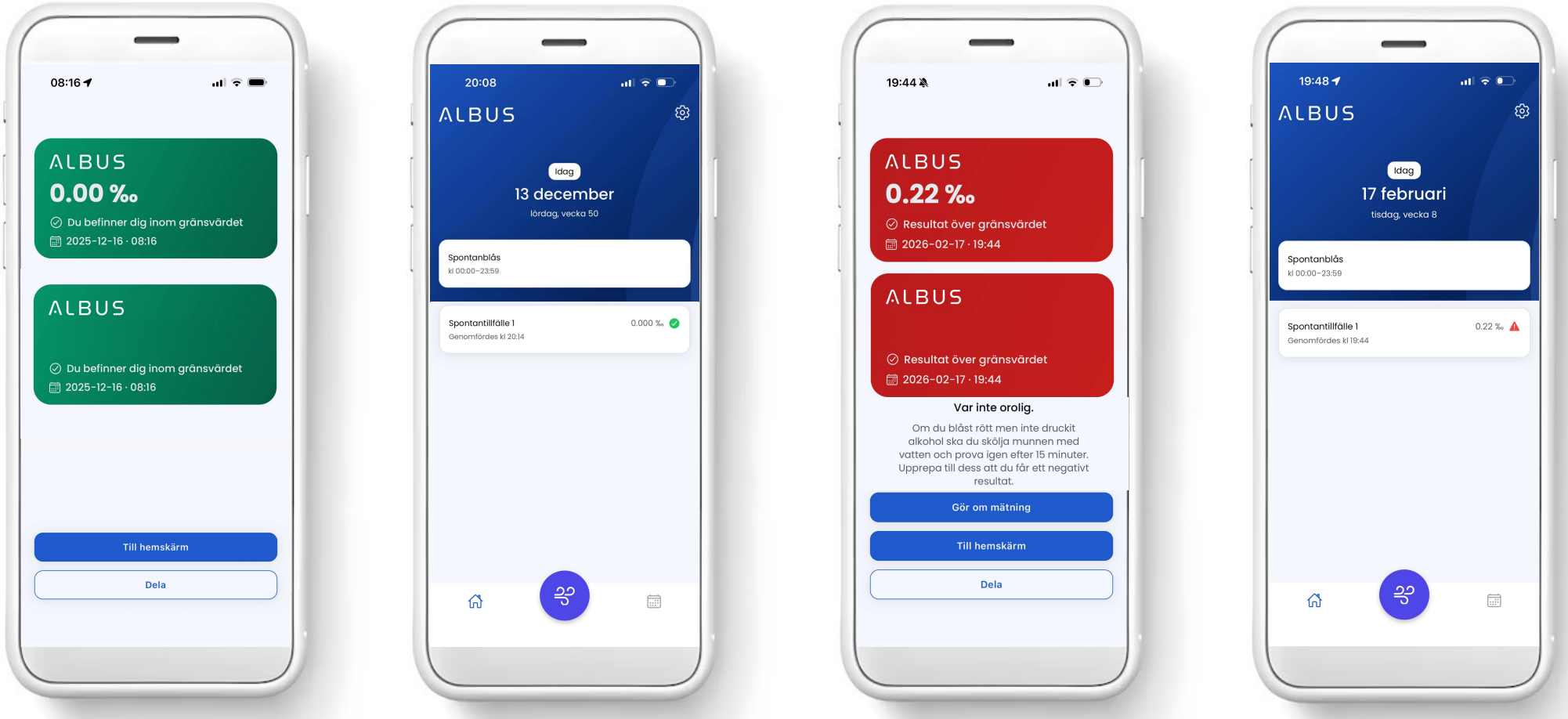
Arbetsgivare/HR
- Kan säkerställa nykterhet på arbetstid, varje dag
- Får potentiellt färre utgifter för urin- och blodprover
- Testerna kan utföras varifrån som helst, utan förlorad arbetstid

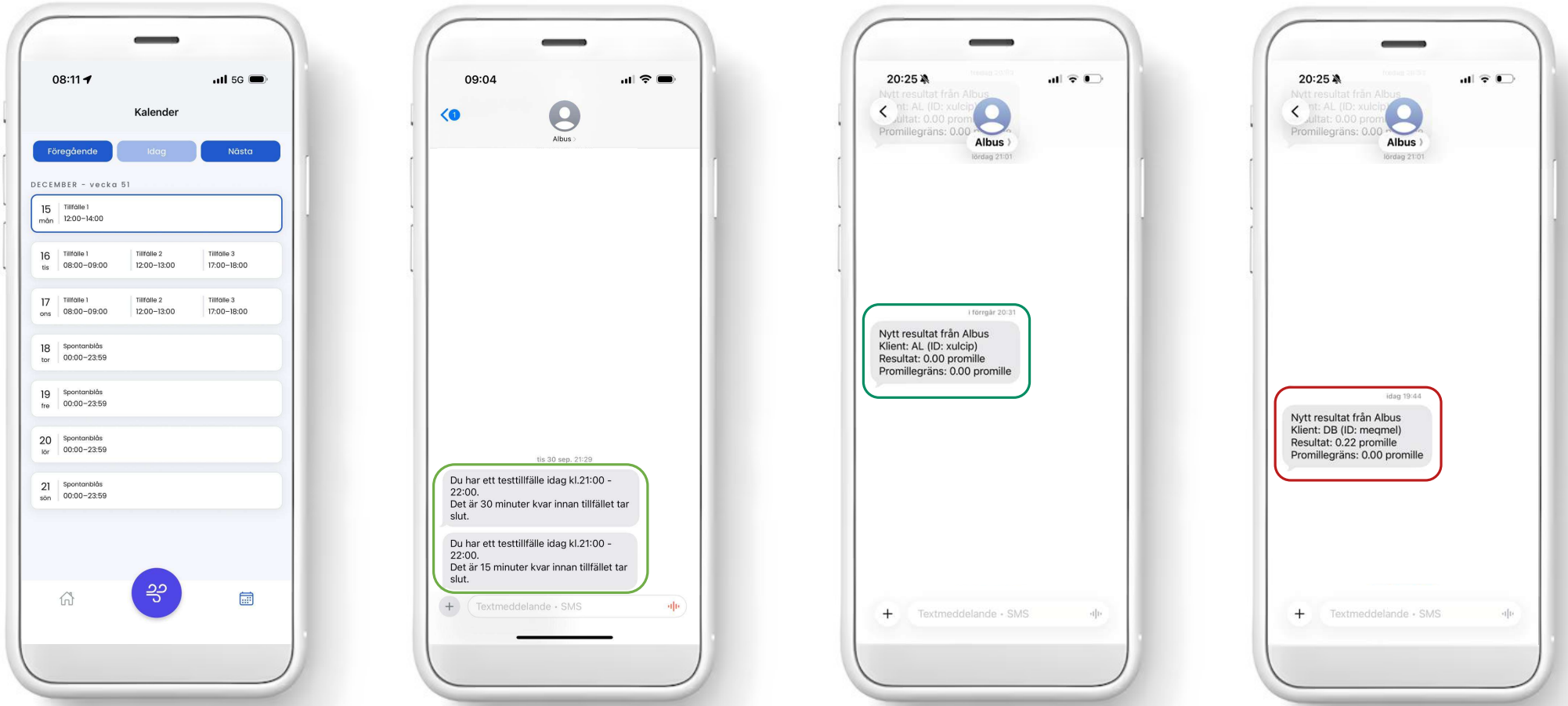


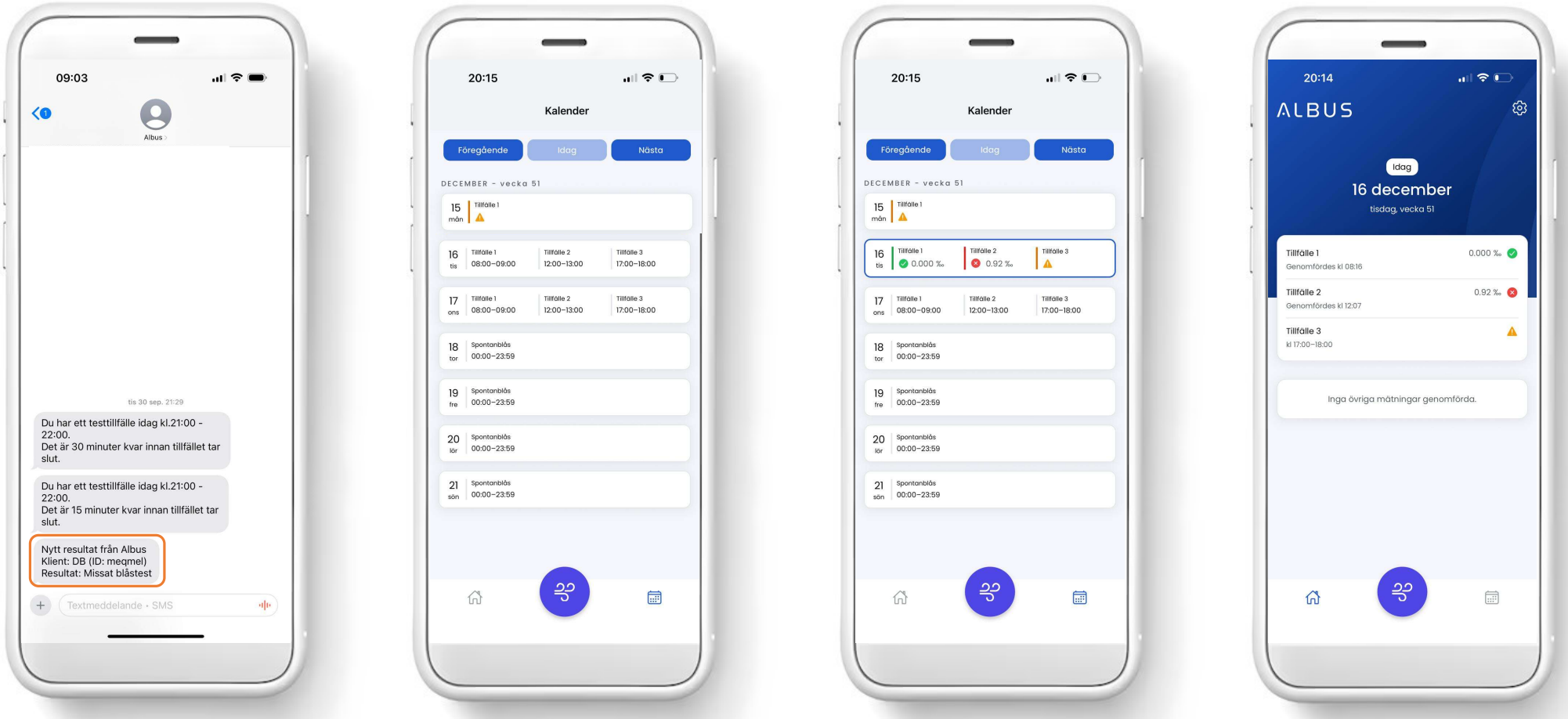

15:34
Svenska
ALBUS
Logga in
Engångskod via SMS för att logga in.
070 271 91 30
Skicka kod
Genom att fortsätta godkänner du våra villkor och integritetspolicy.
15:35
Albus
Albus OTP inloggningskod: 321400
nu
ALBUS
Logga in
Koden har skickats till numret nedan.
0702719130
Ändra nummer
Koden är giltig i 1:59
Skicka ny kod
15:35
ALBUS
Logga in
Koden har skickats till numret nedan.
0702719130
Ändra nummer
Koden är giltig i 1:43
Skicka ny kod
Från Meddelanden
321400
1
2 ABC
3 DEF
4 GHI
5 JKL
6 MNO
7 PQRS
8 TUV
9 WXYZ
0
20:08
ALBUS
Idag
13 december
lördag, vecka 50
Spontanblås
kl 00:00–23:59
Inga övriga mätningar genomförda.

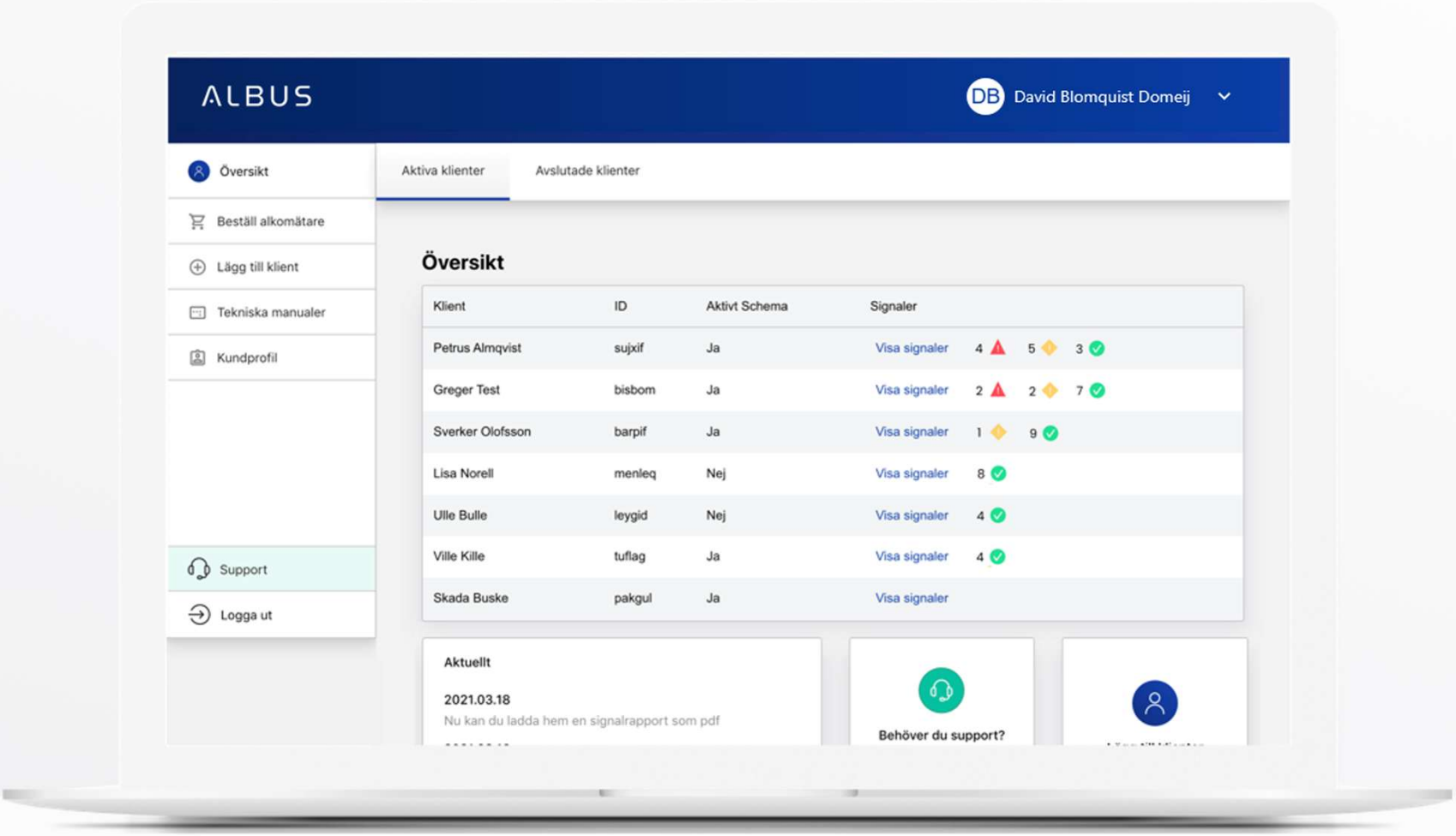

15:37
Avbryt
Status: Ansluter...
Letar efter enhet, starta din mätare.
Uppvärmning
–
19:40
Avbryt
Status: Enhet ansluten
60%
Värmer upp enhet...
Uppvärmning
0%
19:41
Avbryt
Status: Enhet ansluten
60%
Värmer upp enhet...
Uppvärmning
17%
19:41
Avbryt
Status: Enhet ansluten
60%
Enheten är redo.
Uppvärmning


19:57
Avbryt
Status: Enhet ansluten
60%
Ta ett djupt andetag och börja blås
Blåsning
0%
19:57
Avbryt
Status: Enhet ansluten
60%
Fortsätt blås med jämnt tryck
Blåsning
40%
19:58
Avbryt
Status: Enhet ansluten
60%
Analyserar resultat...
Blåsning
19:58
Avbryt
Status: Enhet ansluten
60%
Analyserar resultat...


08:16
ALBUS
0.00 ‰
Du befinner dig inom gränsvärdet
2025-12-16 · 08:16
ALBUS
Du befinner dig inom gränsvärdet
2025-12-16 · 08:16
Till hemskärm
Dela
20:08
ALBUS
Idag
13 december
lördag, vecka 50
Spontanblås
kl 00:00–23:59
Spontantillfälle 1
0.000 ‰
Genomfördes kl 20:14
19:44
ALBUS
0.22 ‰
Resultat över gränsvärdet
2026-02-17 · 19:44
ALBUS
Resultat över gränsvärdet
2026-02-17 · 19:44
Var inte orolig.
Om du blåst rött men inte druckit alkohol ska du skölja munnen med vatten och prova igen efter 15 minuter. Upprepa till dess att du får ett negativt resultat.
Gör om mätning
Till hemskärm
Dela
19:48
ALBUS
Idag
17 februari
tisdag, vecka 8
Spontanblås
kl 00:00–23:59
Spontantillfälle 1
0.22 ‰
Genomfördes kl 19:44


08:11
5G
Kalender
Föregående
Idag
Nästa
DECEMBER - vecka 51
15 mån Tillfälle 1 12:00–14:00
16 tis Tillfälle 1 08:00–09:00 Tillfälle 2 12:00–13:00 Tillfälle 3 17:00–18:00
17 ons Tillfälle 1 08:00–09:00 Tillfälle 2 12:00–13:00 Tillfälle 3 17:00–18:00
18 tor Spontanblås 00:00–23:59
19 fre Spontanblås 00:00–23:59
20 lör Spontanblås 00:00–23:59
21 sön Spontanblås 00:00–23:59
09:04
Albus
tis 30 sep. 21:29
Du har ett testtillfälle idag kl.21:00 - 22:00.
Det är 30 minuter kvar innan tillfället tar slut.
Du har ett testtillfälle idag kl.21:00 - 22:00.
Det är 15 minuter kvar innan tillfället tar slut.
Textmeddelande • SMS
20:25
Albus
lördag 21:01
i förrgår 20:31
Nytt resultat från Albus
Klient: AL (ID: xulcip)
Resultat: 0.00 promille
Promillegräns: 0.00 promille
Textmeddelande • SMS
20:25
Albus
lördag 21:01
idag 19:44
Nytt resultat från Albus
Klient: DB (ID: meqmel)
Resultat: 0.22 promille
Promillegräns: 0.00 promille
Textmeddelande • SMS


09:03
Albus
tis 30 sep. 21:29
Du har ett testtillfälle idag kl.21:00 - 22:00.
Det är 30 minuter kvar innan tillfället tar slut.
Du har ett testtillfälle idag kl.21:00 - 22:00.
Det är 15 minuter kvar innan tillfället tar slut.
Nytt resultat från Albus
Klient: DB (ID: meqmel)
Resultat: Missat blåstest
Textmeddelande · SMS
20:15
Kalender
Föregående
Idag
Nästa
DECEMBER - vecka 51
15 mån Tillfälle 1
16 tis Tillfälle 1 08:00–09:00 Tillfälle 2 12:00–13:00 Tillfälle 3 17:00–18:00
17 ons Tillfälle 1 08:00–09:00 Tillfälle 2 12:00–13:00 Tillfälle 3 17:00–18:00
18 tor Spontanblås 00:00–23:59
19 fre Spontanblås 00:00–23:59
20 lör Spontanblås 00:00–23:59
21 sön Spontanblås 00:00–23:59
20:15
Kalender
Föregående
Idag
Nästa
DECEMBER - vecka 51
15 mån Tillfälle 1
16 tis Tillfälle 1 0.000 ‰ Tillfälle 2 0.92 ‰ Tillfälle 3
17 ons Tillfälle 1 08:00–09:00 Tillfälle 2 12:00–13:00 Tillfälle 3 17:00–18:00
18 tor Spontanblås 00:00–23:59
19 fre Spontanblås 00:00–23:59
20 lör Spontanblås 00:00–23:59
21 sön Spontanblås 00:00–23:59
20:14
ALBUS
Idag
16 december
tisdag, vecka 51
Tillfälle 1 0.000 ‰
Genomfördes kl 08:16
Tillfälle 2 0.92 ‰
Genomfördes kl 12:07
Tillfälle 3
kl 17:00–18:00
Inga övriga mätningar genomförda.


ALBUS
DB David Blomquist Domeij
Översikt
Beställ alkomätare
Lägg till klient
Tekniska manualer
Kundprofil
Support
Logga ut
Aktiva klienter
Avslutade klienter
Översikt
Klient
ID
Aktivt Schema
Signaler
Petrus Almqvist sujxif Ja Visa signaler 4 5 3
Greger Test bisbom Ja Visa signaler 2 2 7
Sverker Olofsson barpif Ja Visa signaler 1 9
Lisa Norell menleq Nej Visa signaler 8
Ulle Bulle leygid Nej Visa signaler 4
Ville Kille tuflag Ja Visa signaler 4
Skada Buske pakgul Ja Visa signaler
Aktuellt
2021.03.18
Nu kan du ladda hem en signalrapport som pdf
Behöver du support?

ALBUS

DB David Blomquist Domeij

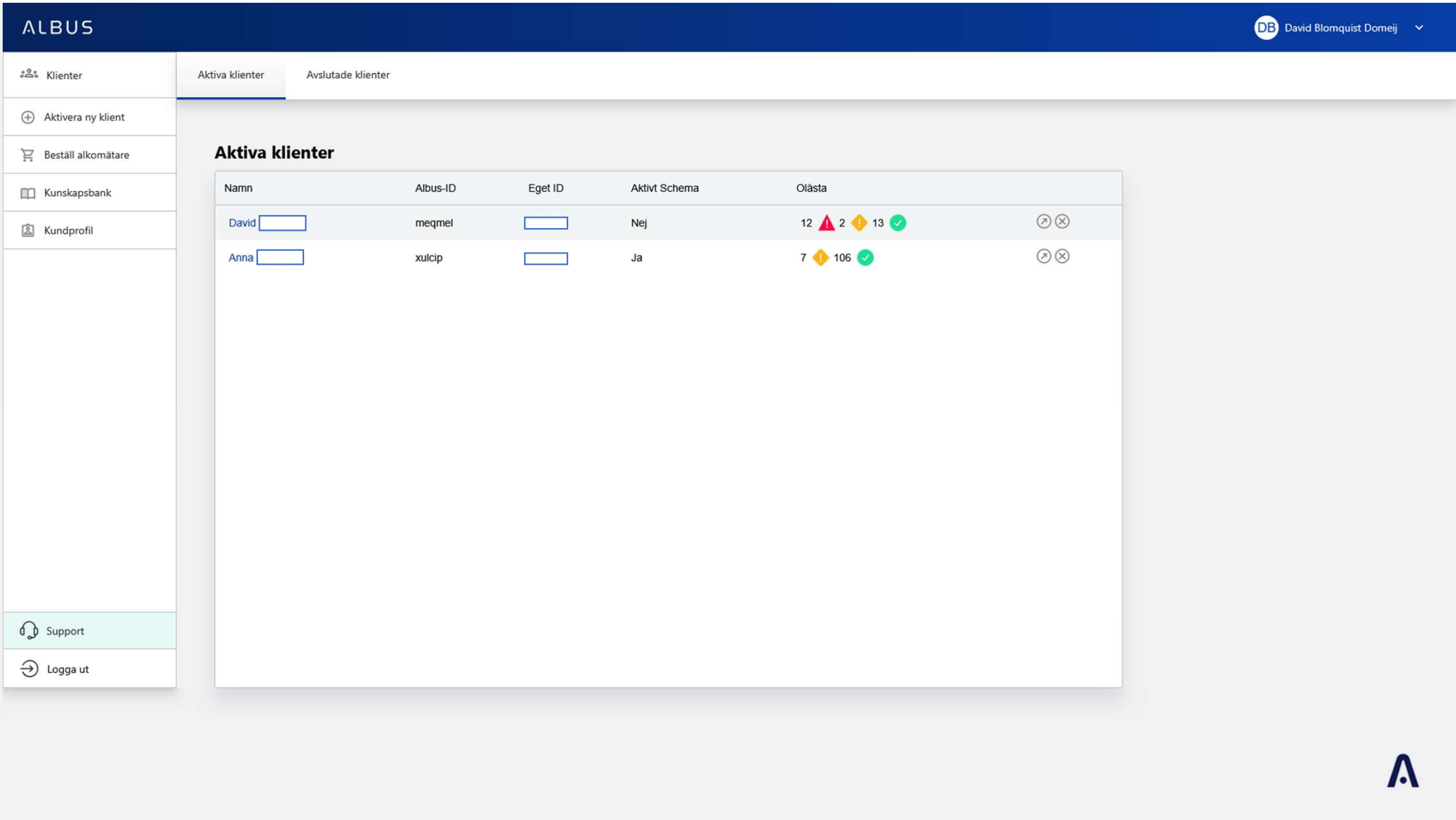
- Klienter
- Aktivera ny klient
- Beställ alkomätare
- Kunskapsbank
- Kundprofil
- Support
- Logga ut

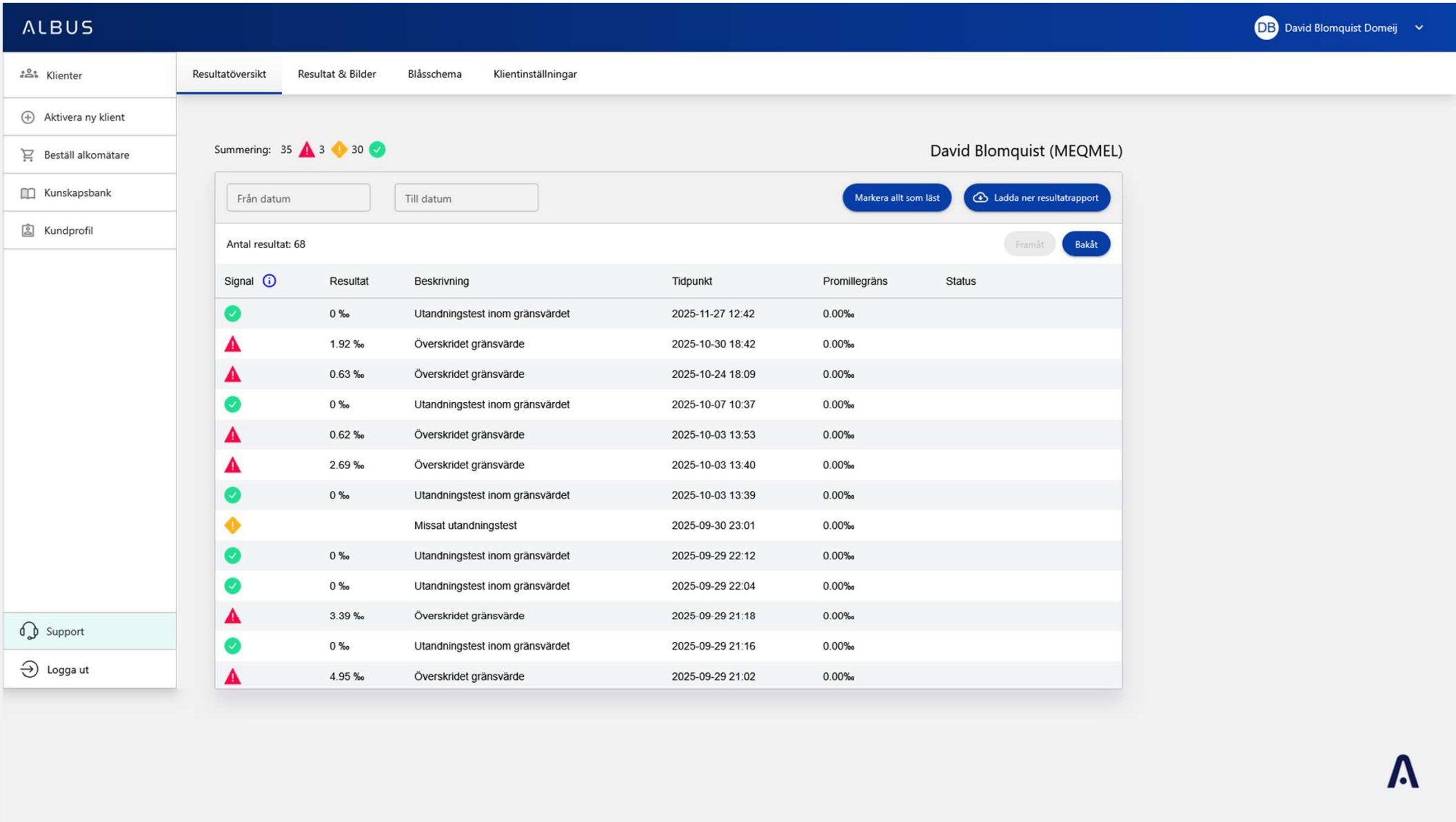


Välkommen till Albus

Kom enkelt igång genom att aktivera nya klienter och beställa alkomätare via menyn till vänster.

Om du skulle behöva hjälp är du alltid välkommen att kontakta vår support.


ALBUS
DB David Blomquist Domeij
Klienter
Aktivera ny klient
Beställ alkomätare
Kunskapsbank
Kundprofil
Support
Logga ut
Aktiva klienter
Avslutade klienter
Aktiva klienter
Namn
Albus-ID
Eget ID
Aktivt Schema
Olästa
David
meqmel
Nej
12 2 13
Anna
xulcip
Ja
7 106


ALBUS
DB David Blomquist Domeij
Klienter
Aktivera ny klient
Beställ alkomätare
Kunskapsbank
Kundprofil
Support
Logga ut
Resultatöversikt
Resultat & Bilder
Blåsschema
Klientinställningar
Summering: 35 3 30
David Blomquist (MEQMEL)
Från datum
Till datum
Markera allt som läst
Ladda ner resultatrapport
Antal resultat: 68
Framåt
Bakåt
Signal
Resultat
Beskrivning
Tidpunkt
Promillegräns
Status
0 ‰ Utandningstest inom gränsvärdet 2025-11-27 12:42 0.00‰
1.92 ‰ Överskridet gränsvärde 2025-10-30 18:42 0.00‰
0.63 ‰ Överskridet gränsvärde 2025-10-24 18:09 0.00‰
0 ‰ Utandningstest inom gränsvärdet 2025-10-07 10:37 0.00‰
0.62 ‰ Överskridet gränsvärde 2025-10-03 13:53 0.00‰
2.69 ‰ Överskridet gränsvärde 2025-10-03 13:40 0.00‰
0 ‰ Utandningstest inom gränsvärdet 2025-10-03 13:39 0.00‰
Missat utandningstest 2025-09-30 23:01 0.00‰
0 ‰ Utandningstest inom gränsvärdet 2025-09-29 22:12 0.00‰
0 ‰ Utandningstest inom gränsvärdet 2025-09-29 22:04 0.00‰
3.39 ‰ Överskridet gränsvärde 2025-09-29 21:18 0.00‰
0 ‰ Utandningstest inom gränsvärdet 2025-09-29 21:16 0.00‰
4.95 ‰ Överskridet gränsvärde 2025-09-29 21:02 0.00‰

ALBUS

DB David Blomquist Domeij

- Klienter
- Aktivera ny klient
- Beställ alkomätare
- Kunskapsbank
- Kundprofil
- Support
- Logga ut

Resultatöversikt | Resultat & Bilder | Blåsschema | Klientinställningar

Resultat & bilder

David Blomquist (MEQMEL)

2025

Framåt | Bakåt | Dölj bilder



Datum
2025-11-27 *12:42:47*
Resultat
0 ‰



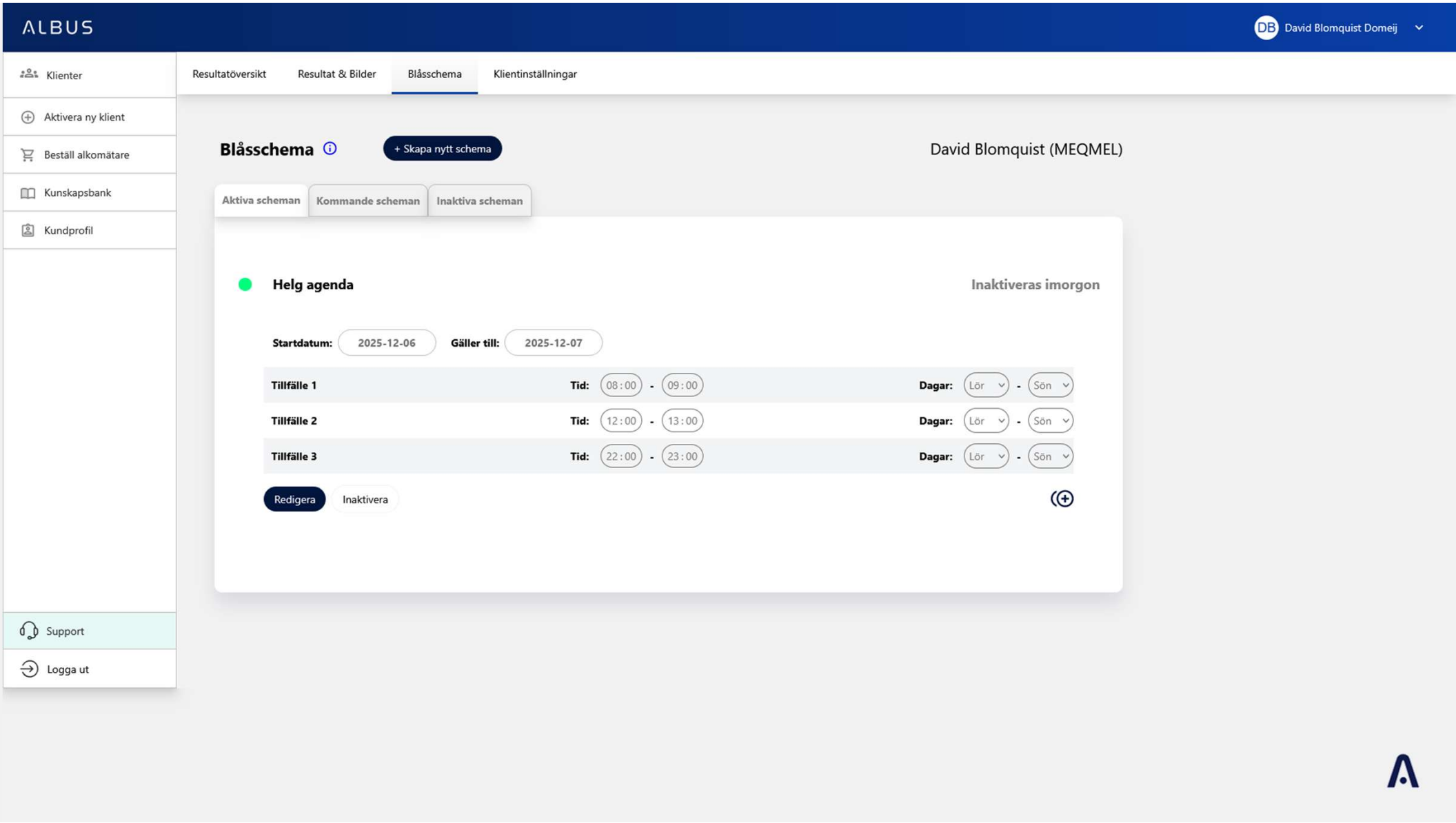
Datum
2025-10-30 *18:42:58*
Resultat
1.92 ‰



Datum
2025-10-24 *17:09:06*
Resultat
0.63 ‰



Datum
2025-10-07 *09:37:11*
Resultat
0 ‰


ALBUS
DB David Blomquist Domeij
Klienter
Aktivera ny klient
Beställ alkomätare
Kunskapsbank
Kundprofil
Support
Logga ut
Resultatöversikt
Resultat & Bilder
Blåsschema
Klientinställningar
Blåsschema
+ Skapa nytt schema
David Blomquist (MEQMEL)
Aktiva scheman
Kommande scheman
Inaktiva scheman
Helg agenda
Inaktiveras imorgon
Startdatum: 2025-12-06
Gäller till: 2025-12-07
Tillfälle 1 Tid: 08:00 - 09:00 Dagar: Lör - Sön
Tillfälle 2 Tid: 12:00 - 13:00 Dagar: Lör - Sön
Tillfälle 3 Tid: 22:00 - 23:00 Dagar: Lör - Sön
Redigera
Inaktivera

ALBUS

DB David Blomquist Domeij

- Klienter
- Aktivera ny klient
- Beställ alkomätare
- Kunskapsbank
- Kundprofil
- Support
- Logga ut

Resultatöversikt | Resultat & Bilder | Blåsschema | Klientinställningar

Klientinställningar

David Blomquist (MEQMEL)

FÖRNAMN *
David

EFTERNAMN *
Blomquist

KLIENTENS TELEFONNUMMER *
0702719130

ALBUS-ID
meqmel

EGET ID
770612

TELEFONNUMMER FÖR RESULTATDELNING
0702719130 ×
Vid flera telefonnummer trycker du enter efter varje

DELA RESULTAT VIA SMS VID:
Missade och över promillegräns

PROMILLEGRÄNS
0.00

TIDSSKILLNAD
+0 h

VISA MÄTRESULTAT FÖR KLIENTEN?
Ja, visa promille efter blås

Nej, visa inget promille efter blås
Ja, visa promille efter blås

Spara ändringar | Skicka nytt välkomst-sms

ALBUS RESULTATRAPPORT

Albus-ID: **MEQMEL**

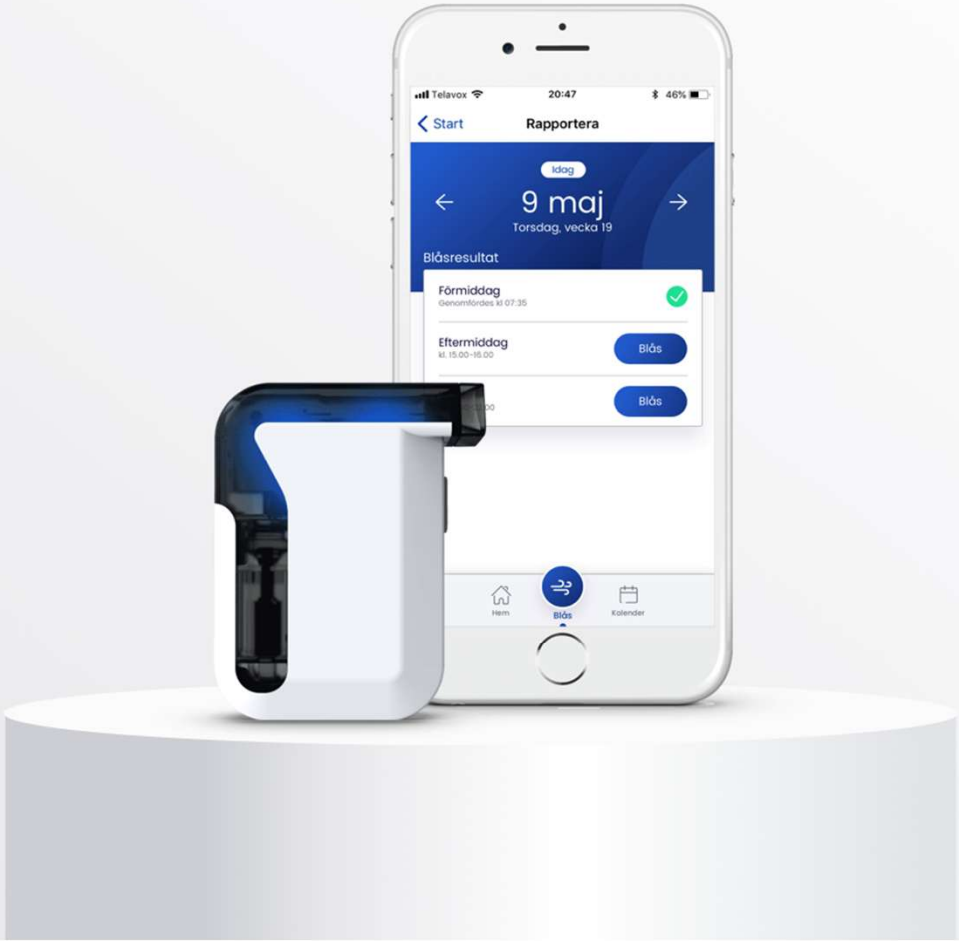
Antal resultat: **68**

Summering: **35** **3** **30**

Signal	Resultat(‰)	Beskrivning	Datum	Tidpunkt	Promillegräns(‰)
✓	0	Utandningstest inom gränsvärdet	2025-11-27	12:42	0.0
!	1.92	Överskridet gränsvärde	2025-10-30	18:42	0.0
!	0.63	Överskridet gränsvärde	2025-10-24	18:09	0.0
✓	0	Utandningstest inom gränsvärdet	2025-10-07	10:37	0.0
!	0.62	Överskridet gränsvärde	2025-10-03	13:53	0.0
!	2.69	Överskridet gränsvärde	2025-10-03	13:40	0.0
✓	0	Utandningstest inom gränsvärdet	2025-10-03	13:39	0.0
!		Missat utandningstest	2025-09-30	23:01	0.0
✓	0	Utandningstest inom gränsvärdet	2025-09-29	22:12	0.0
✓	0	Utandningstest inom gränsvärdet	2025-09-29	22:04	0.0
!	3.39	Överskridet gränsvärde	2025-09-29	21:18	0.0
✓	0	Utandningstest inom gränsvärdet	2025-09-29	21:16	0.0
!	4.95	Överskridet gränsvärde	2025-09-29	21:02	0.0
✓	0	Utandningstest inom gränsvärdet	2025-09-29	21:00	0.0
✓	0	Utandningstest inom gränsvärdet	2025-09-23	15:08	0.0
!		Missat utandningstest	2025-09-05	17:01	0.0
✓	0	Utandningstest inom gränsvärdet	2025-09-04	16:09	0.0

ALBUS

www.albuscare.com





David Blomquist
VD
David.blomquist@albuscare.com



Ulrika Holmquist
KAM / Kundsupport
Ulrika.holmqvist@albuscare.com